

빠른 참조 가이드

시스템 켜기

시스템 뒷면에 있는 전원 버튼을 누릅니다.

연구 개시

신규 환자

- 1 시작 화면에서 Enter Patient Information (환자 정보 입력)을 탭하거나 터치스크린에서 + New Patient (신규 환자 추가)를 탭합니다.
- 2 환자의 정보를 입력합니다.
- 3 Scan(스캔)을 탭하여 이미징을 시작합니다. 연구 중에 저장한 데이터는 모두 환자에게 연결됩니다.

검사 유형


- 1 트랜스듀서와 검사 버튼을 선택합니다.
- 2 트랜스듀서와 검사 유형을 선택합니다.
- 3 검사 유형을 두 번 탭하거나 Scan(스캔)을 탭하여 이미징을 시작합니다.

스캔하기

- 기본 모드는 2D입니다. 2D를 탭하여 기본 모드로 돌아갑니다.
- M을 탭하여 M 모드에서 스캔합니다.
- C를 탭하여 컬러 도플러 모드에서

스캔합니다. M 모드

- 1 터치스크린에서 2D 화상에 M라인을 배치합니다.
- 2 M라인 및 트레이스를 모두 표시하려면 M을 다시 누릅니다.
- 3 이미지 또는 트레이스를 탭하여 둘 사이의 제어부를 전환합니다.

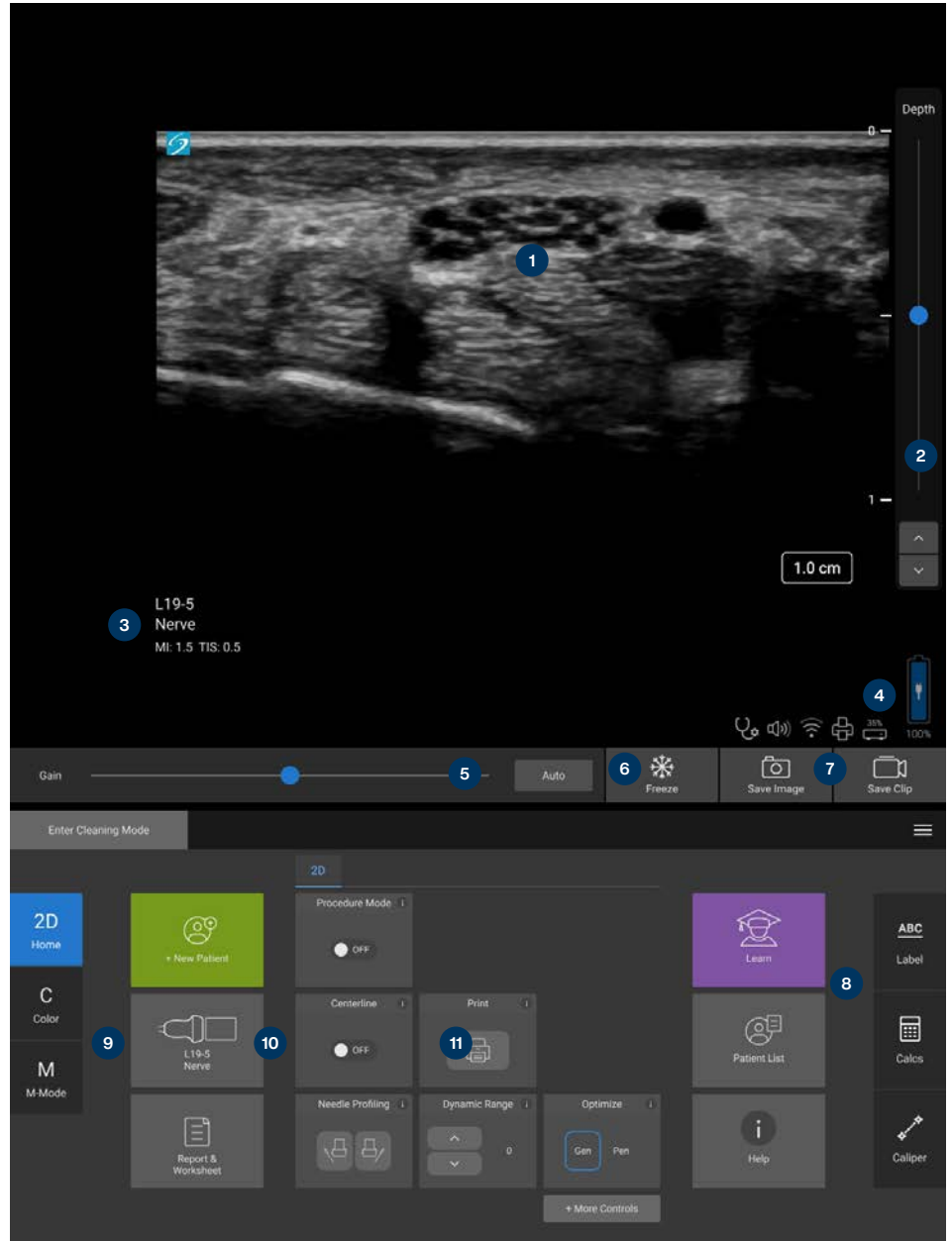

버튼:

- 1 임상 모니터 및 터치스크린
- 2 깊이 제어부
- 3 검사 유형
- 4 배터리 수준 및 연결
- 5 이득 또는 Cine 제어부

- 6 정지
- 7 저장 버튼
- 8 라벨, 계산, 캘리퍼
- 9 모드
- 10 환자, 트랜스듀서 및 검사 선택기, 보고서 및 워크시트
- 11 더 많은 제어부

빠른 참조 가이드

게인

다음 중 하나를 실시하여 게인을 조정하십시오.

- 터치스크린의 슬라이더를 조정합니다.
- Auto(자동)를 탭하여 게인을 자동 조정합니다.

깊이

- 터치스크린 오른쪽의 깊이 올리기/낮추기 버튼을 사용합니다.

프리즈, 프리즈 해제, 사인 사용

- 1 탭  CINE 제어부가 아이콘 왼쪽에 나타납니다..
- 2 터치스크린에서 손가락을 수평으로 오른쪽 또는 왼쪽으로 드래그하여 Cine 프레임을 통해 앞뒤로 움직입니다. 프레임 단위로 이동하려면 방향 화살표를 탭합니다.
- 3 프리즈를 해제하려면  을(를) 다시 탭합니다.

Zoom(확대/축소)

라이브 줌

- 1 터치스크린의 Zoom(확대)제어부를 탭합니다.
- 2 터치스크린에서 드래그하여 확대/축소 상자를 해당 위치에 둡니다.
- 3 코너의 원을 탭하고 드래그하여 확대/축소 상자의 크기를 제어합니다.
- 4 컨트롤을 다시 탭하여 확대합니다.

정지 줌

- 1 탭 .
- 2 컨트롤을 위 또는 아래로 탭하여 배율을 조정합니다.
- 3 터치스크린의 이미지를 패닝합니다.

측정° 및 계산

측정

- 1 라이브 또는 정지 화상에서 Caliper (캘리퍼)/  를 탭합니다.
- 2 캘리퍼의 끝부분을 이용해 캘리퍼를 배치하거나 다른 측정을 선택합니다.

계산

- 1 라이브 또는 정지 화상에서 Calcs(계산)/  를 탭하여 분석 패키지를 표시합니다.
- 2 터치스크린에서 측정을 탐색하고 선택합니다.
- 3 터치스크린에 캘리퍼를 배치합니다.

라벨

- 1 ABC 를 탭하여 라벨링 페이지를 표시합니다.
- 2 Text(텍스트), Picto(픽토그래프) 또는 Arrow(화살표)를 탭하여 화상에 텍스트, 픽토그래프 또는 화살표를 추가합니다.
- 3 터치스크린에 라벨을 배치합니다.

저장 및 검토

-  을(를) 탭하여 화상, 현재 측정값, 라벨 및 계산값을 저장합니다. 계산값 및 관련 측정값도 환자 보고서에 저장됩니다.
-  을(를) 탭하여 클립을 저장합니다.
- 썸네일 화상을 탭하여 검토 화면에 액세스하거나, Patient List(환자 목록)를 탭하여 그 외의 연구를 열람합니다 (이 옵션은 메인 터치스크린의 환자 또는 보고서 양식 아래쪽, 또는 메뉴에서 찾을 수 있습니다).

종료 및 내보내기

- 1 END STUDY(연구 종료)를 탭하여 연구를 종료합니다. 종료하지 않은 연구는 내보낼 수 없습니다.
- 2 USB 저장장치를 시스템 또는 스탠드의 USB 포트에 삽입합니다.
- 3 Patient List(환자 목록)를 탭합니다. 내보낼 연구(여러 개 가능)를 선택합니다.
- 4 Send to(전송 경로)를 탭한 다음 USB를 탭합니다.
- 5 목록에서 USB 드라이브를 선택하고 환자 정보의 포함 여부를 선택합니다.
- 6 Export(내보내기)를 탭합니다.

도움말 및 학습

-  을 탭하여 시스템 내 도움말을 엽니다.
- Learn(학습) 기능에 액세스하여 교육/절차 동영상 열람합니다.

P31264-03



CE
2797

FUJIFILM SONOSITE
Value from Innovation

FUJIFILM Sonosite, Inc.

본사
21919 30th Drive SE, Bothell, WA 98021-3904
전화: +1 (425) 951 1200 또는 +1 (877) 657 8050
팩스: +1 (425) 951 6800
www.sonosite.com

Sonosite 지역본부

FUJIFILM Sonosite Australasia Pty Ltd: Australia 300 663 516
FUJIFILM Sonosite Australasia Pty Ltd: New Zealand 0800 888 204
FUJIFILM Sonosite Brazil +55 11 5574 7747
FUJIFILM Sonosite Canada Inc. +1 888 554 5502
FUJIFILM (China) Investment Co., Ltd +86 21 5010 6000
FUJIFILM Sonosite GmbH-Germany +49 69 80 88 40 30
FUJIFILM Sonosite, Inc.-United States +1 425 951 1200

FUJIFILM Sonosite India Pvt Ltd. +91 124 288 1100
FUJIFILM Sonosite Iberica SL-Spain +34 91 123 84 51
FUJIFILM Medical Co., Ltd.-Japan +81 3 0418 7190
FUJIFILM Sonosite Korea Ltd +65 6380 5589
FUJIFILM Sonosite Ltd-United Kingdom +44 1462 341 151
FUJIFILM Sonosite SARL-France +33 182 880 702

SONOSITE, SONOSITE 로고, Any patient. Anywhere. Anytime은 여러 관할에서 FUJIFILM Sonosite, Inc.의 상표 및 등록 상표입니다. FUJIFILM은 여러 관할 구역에서 FUJIFILM Corporation의 상표 및 등록상표입니다. 그 밖의 모든 상표는 각 소유주의 재산입니다.

저작권 © 2023 FUJIFILM Sonosite, Inc. 모든 권리 보유.

12/2023

Any patient. Anywhere. Anytime.